


# PETUNJUK SWAB MANDIRI



## JANGAN DILANJUTKAN JIKA:

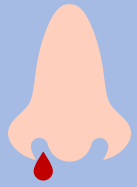

Mimisan dalam  
24 jam terakhir



Operasi hidung  
dalam 4 minggu  
terakhir



Cedera wajah  
dalam 8 minggu  
terakhir

## PROSEDUR SWAB

- 1 Harap bersihkan tangan Anda sebelum memulai tes.




- 2 Sebelum memulai tes, keluarkan satu swab stick, satu tabung reagen, dan satu cartridge. Buka penutup tabung reagen dan keluarkan cartridge dari kemasannya.




- 3 Keluarkan swab stick dari kemasannya.



- 4 Masukkan swab stick ke dalam lubang hidung (~2,5cm). Putar stick 5 kali lalu diamkan selama 5 detik.

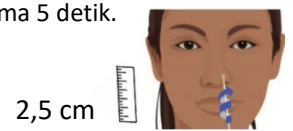


- 5 Ulangi ke dalam lubang hidung lainnya dengan swab yang sama.

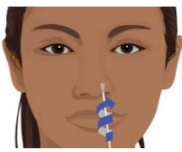


- 6 Masukkan swab stick ke dalam tabung reagen. Celupkan swab naik turun selama 15 detik.



- 7 Tekan tabung reagen saat menarik alat swab.

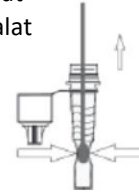

- 8 Tutup penutup tabung reagen rapat-rapat. Anda akan mendengar bunyi "klik".

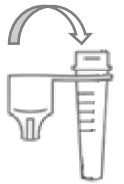

- 9 Gunakan jari Anda untuk mengetuk sisi tabung secara perlahan. Ini membantu mencampur larutan.




- 10 Letakkan 3 tetes ke lubang sampel pada test cartridge.



- 11 Tunggu selama 15 menit sebelum mengecek hasilnya di test cartridge. Letakkan test cartridge di permukaan yang rata sambil menunggu.

15 menit

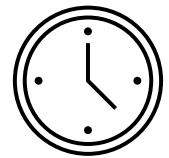


- 12 Baca hasilnya pada test cartridge. **Jika Anda melihat adanya garis di kedua posisi "C" dan "T", ini menunjukkan hasil tes positif. Harap mencari pertolongan medis untuk evaluasi lebih lanjut dan tes konfirmasi.**

**Jika Anda melihat adanya garis hanya pada posisi "C",** ini menunjukkan hasil test negatif.

**Jika Anda melihat adanya garis hanya pada posisi "T",** maka hasil tes invalid. Harap ulangi test dengan menggunakan alat tes lainnya.


- 13 Buang swab stick, tabung reagen, dan test cartridge yang sudah dipakai ke dalam kantong sampah medis.

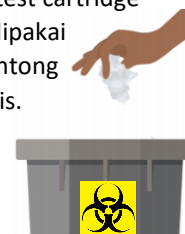

- 14 Bersihkan tangan Anda setelah tes.



### POSITIF

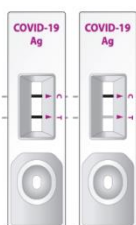

### NEGATIF



### INVALID



"C" Control Line  
"T" Test Line