


# คำแนะนำในการทดสอบด้วยตนเอง

สำหรับการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วของวิธีแอบบอต แพนไบโอ



## อย่าดำเนินการทดสอบหาก

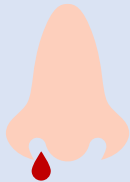

มีเลือดกำเดาไหลใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา



มีการผ่าตัดจมูก ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา



มีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าในช่วง 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา

## ขั้นตอนในการทดสอบ

1

กรุณาทำความสะอาดมือก่อนเริ่มการทดสอบ




2

ก่อนเริ่มการทดสอบโปรดนำไม้สำลีหนึ่งอัน อุปกรณ์ทดสอบหนึ่งชุด ขวดน้ำยาหนึ่งขวดและหลอดสกัดหนึ่งหลอด นำอุปกรณ์ทดสอบออกจากบรรจุภัณฑ์



3

ถอดฝาออกจากขวดน้ำยา ถือขวดน้ำยาในแนวตั้ง และเติมด้วยน้ำยาลงในหลอดสกัดจนไหลขึ้นถึงเส้นจของหลอดสกัด

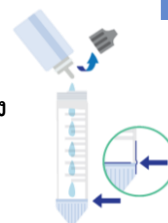

4

นำไม้สำลีออกจากบรรจุภัณฑ์



5

สอดไม้สำลีเข้าไปในรูจมูกในขณะที่หมุนเบา ๆ หมุนวนไม้ 5 ครั้ง



6

ใช้ไม้อันเดียวกัน ทำซ้ำกับรูจมูกอีกข้างหนึ่ง




7

หมุนปลายไม้สำลีในน้ำยากับผนังของหลอดสกัดอย่างน้อย 5 ครั้ง



8

บีบหลอดสกัดรวมกับสำลีที่ปลายไม้

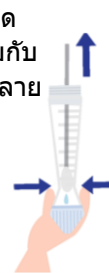

9

หักไม้สำลีที่จุดหัก แล้วทิ้งไม้สำลีไว้ในหลอด ปิดฝาของหลอดสกัด



10

ใช้นิ้วเคาะเบา ๆ ที่ข้าง ๆ ของหลอดเพื่อผสมสารละลาย



11

เปิดฝาคิววิตที่ด้านล่างของหลอดสกัด



12

บีบสารละลาย 5 หยดลงในบ่อตัวอย่างบนอุปกรณ์ทดสอบ ปิดฝาคิววิตเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว



13

กรณารอ 15 นาทีก่อนตรวจสอบผลอยู่บนดิสก์ โปรดให้ดิสก์วางอยู่บนพื้นผิวเรียบตลอดระยะเวลา



14

อ่านผลลัพธ์บนดิสก์ทดสอบ หากคุณเห็นเส้นปรากฏขึ้นทั้งที่ตำแหน่งตัวอักษร "C" และ "T" แสดงว่าผลการทดสอบในเชิงบวก โปรดไปพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน

หากคุณเห็นเส้นปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งตัวอักษร "C" เท่านั้น แสดงว่าผลการทดสอบเชิงลบ

หากคุณเห็นเส้นปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งตัวอักษร "T" เท่านั้น แสดงว่าการทดสอบไม่ถูกต้อง โปรดทำการทดสอบซ้ำกับชุดทดสอบอื่น

15

ทิ้งไม้สำลี หลอดน้ำยา และดิสก์ทดสอบที่ใช้แล้วทั้งหมดลงในถังปลอดสารพิษ




16


ทำความสะอาดมือหลังการทดสอบ




เชิงบวก

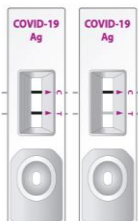

เชิงลบ

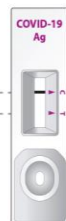

ไม่ถูกต้อง

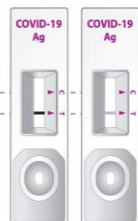

"C" Control Line  
"T" Test Line