


用拭子进行“自我检测”指南



如果发生以下情况，请勿继续进行检测：

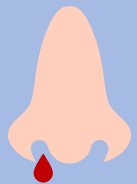

过去的**24小时**，
鼻腔出血



过去的**4个星期**，
动过鼻腔手术



过去**8个星期**，
脸部受过伤

拭子检测程序

1

开始测试前，
请把双手洗
干净。



2

开始测试之前，请取出
一根拭子条、一个试
剂管和一个试剂
盒。松开
试剂管的
盖子，然后从
包装中取出试剂盒。



3


从包装盒中，取出
拭子条。



4

把拭子条插入鼻孔（大约
2.5公分深）转动拭子条5
次，让拭子
留在鼻钟。

2.5公分

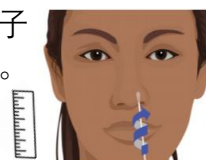


5

用同一根拭子条，
为另一个鼻孔作
同样的测试。




6

把拭子条插入
试剂管，上下
抽动15秒钟。

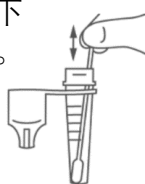

7

当你取出拭子条
的时候，请挤压
一下试剂管。

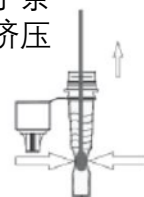

8

请把试剂管的盖子
盖紧，盖紧时，您会
听到“哒”的一声。



9

用手指轻敲试剂
管的侧面数次，
这有助于使溶剂
混合均匀。



10


把3滴溶液倒入检
测盒的样本容器。



11

等待 **15 分钟**，然后检查测
试盒上所显示的结果，在
这段时间内，请将测试盒
放在平坦的表面上。

15 分钟

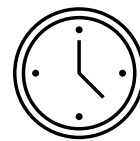

12

读取测试盒上显示的检
测结果。**如果您看到一
条线出现在“C”和“T”这
两个位置，这显示测试
结果呈阳性，请找医
护人员进一步评估、
验证和确认这项测试。**

**如果您看到一条线只是出
现在“C”的位置，这检测
结果呈阴性。**

**如果您看到一条线只是出现在
“T”的位置上，表示这项测试
无效，请使用另一套测试器重
新测试一次。**

13

把所有用过的拭子条、
试剂管和测试盒，丢
进生物危害品
袋子。




14

测试完成后，
请洗净双手。




阳性

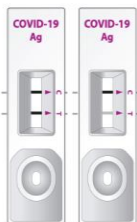

阴性



无效

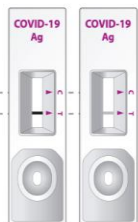

“C” Control Line
“T” Test Line